

内毒素检测仪 Toxinometer® ET-7000

- ▶ 支持美国/欧洲/日本药典中的“细菌内毒素测试”
- ▶ 符合FDA 21 CFR Part 11标准
- ▶ 通过国际C-UL (CSA) · CE认证

高灵敏度

- 高灵敏度检测, 检测下限0.0002 EU/mL
- 检测范围为0.0002-0.5 EU/mL
(以上为使用了Limulus Color KY Single Test试剂盒的数据)

高灵活性

- 支持凝胶法、动态比浊法、动态显色法
- 高通量, 配合拓展模块最多可同时检测128个样本

高可靠性

- 符合FDA 21 CFR Part 11标准, 保证数据完整性
- 配套高品质玻璃试管检测, 在无内毒素环境下检测



应用

Toxinometer® 配合专用试剂, 可用于细菌内毒素检测、微生物污染检测等多个领域。
*独立分装的Single test试剂, 操作更简便, 直接添加样品即可上机检测。




● 细菌、真菌检测

高灵敏度SLP试剂盒 II (产品编号: 296-81001)

产品编号	产品名称	包装
296-81001	SLP-HS Single Reagent Set II 高灵敏度SLP试剂盒 II (独立包装)	20 tests

SLP试剂配合Toxinometer® 的检测实例

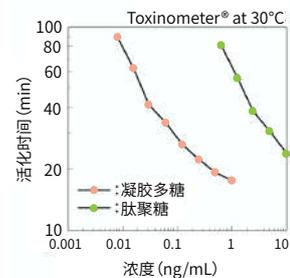

● 细菌内毒素检测

FDA认证 鲎试剂PYROSTAR™ ES-F (产品编号: 295-72301等)

产品编号	产品名称	包装
295-72301	PYROSTAR ES-F Single Test, 0.015 EU/mL 鲎试剂PYROSTAR ES-F, 独立分装, 0.015	25 tests




Toximaster®

专属软件, 进行高效和高质量分析。


预设实验方案



实时确认实验进程

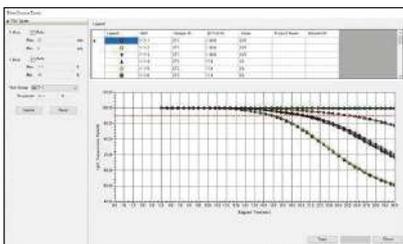

制备标准曲线

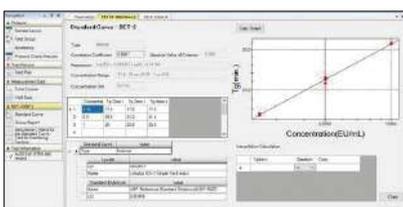

数据完整性: Part 11功能

满足您对数据完整性的需求

电子签名

Login

FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

Account Name:

Password:

所有测量记录与电子签名关联
防止数据被篡改及伪造

审计跟踪

#	Observed At	Operator Name	Operation	Event	Test Record State	User Record ID	Revision
1	2016/07/14 09:35:08	QC8/ETP-20	Test Operator	Initial Page Memory	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
2	2016/07/14 09:35:10	QC8/ETP-20	Test Operator	Initial Protocol	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
3	2016/07/14 09:35:11	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
4	2016/07/14 09:35:12	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
5	2016/07/14 09:35:13	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
6	2016/07/14 09:35:14	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
7	2016/07/14 09:35:15	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
8	2016/07/14 09:35:16	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
9	2016/07/14 09:35:17	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
10	2016/07/14 09:35:18	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
11	2016/07/14 09:35:19	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
12	2016/07/14 09:35:20	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
13	2016/07/14 09:35:21	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
14	2016/07/14 09:35:22	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
15	2016/07/14 09:35:23	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
16	2016/07/14 09:35:24	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
17	2016/07/14 09:35:25	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
18	2016/07/14 09:35:26	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
19	2016/07/14 09:35:27	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
20	2016/07/14 09:35:28	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
21	2016/07/14 09:35:29	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None
22	2016/07/14 09:35:30	QC8/ETP-20	Test Operator	Load Test Method	REI-2	15662765-2000-4004-1054-3	None

自动记录实验操作步骤
可以通过日志文件确认操作历史

基本配置

Toxinometer® ET-7000/E Part 11 套装 【产品编号: 299-35821】

【内含】



符合FDA 21 CFR Part11标准

Toxinometer® ET-7000/E Non part 11 Set 11 套装 【产品编号: 296-35831】

【内含】



不符合FDA 21 CFR Part11标准

可选拓展模块

Toxinometer® ET-7000/E 【产品编号: 292-35811】

※ Part 11 set或非 Part 11套装的拓展模块。

※ 本单页内容如有更改, 恕不另行通知。

上述试剂仅供实验研究用, 不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako; <https://labchem-wako.fujifilm.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 010 64136388

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

