

生物制药专用培养基

疫苗

抗体

基因治疗

富士胶片和光凭借一百年来在高品质化学品与生命科学高端产品的生产经验,开发出符合GMP标准的WakoVAC系列及杂交瘤无血清培养基,可适应小试到放大,适用于生物制药规模化生产。除了优质的产品外,富士胶片和光还提供从培养基优化服务到IND/NDA监管的完整服务流程支持。

监管法规支持

规模化生产

固/液形式

配方优化

已经应用于:
● 流感疫苗
● COVID-19疫苗

Vero

MDCK


昆虫细胞

杂交瘤

WakoVAC Vero细胞用培养基

- 不含动物源原料, 含有酵母水解物
- 广泛支持小试到大规模的疫苗生产
- 可以应对从研究到量产多种规模的使用
- 采用最新的GMP标准, 实施原材料变更管理



WakoVAC Vero的原型1以及原型2, 和其他培养基相比具有更佳的细胞增殖效果。

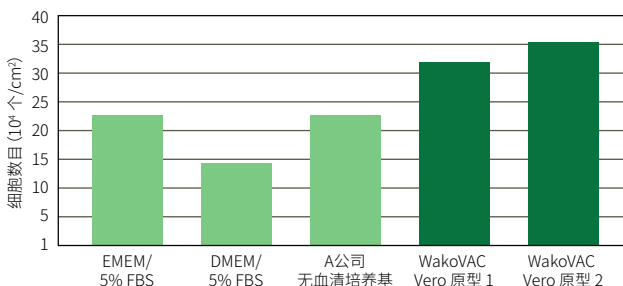

培养板: 12孔板 (康宁, #3513)
细胞类型: Vero细胞
细胞数: 30,000细胞/孔
培养条件: 37 °C、5%CO₂
培养时长: 5天
培养基用量: 2.0 mL

WakoVAC MDCK疫苗生产用培养基

- 无动物来源成分
- 兼容微载体
- 高病毒产量
- 无需驯化

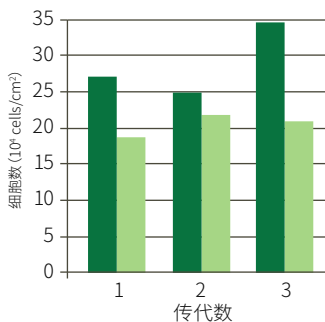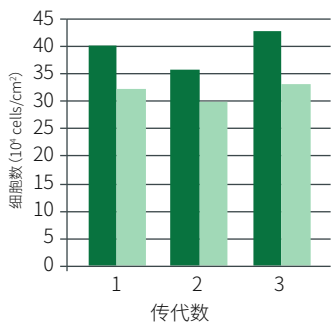


■ WakoVAC MDCK Serum-Free Medium, Prototype
■ EMEM+NEAA+10%FBS

■ WakoVAC MDCK Serum-Free Medium, Prototype
■ B公司

WakoVAC PSFM-J1疫苗生产用培养基

- 支持多种昆虫细胞, 包括SF+, Sf9, Sf21及Hi5等
- 包含鱼肝油 (cGMP) 和酵母衍生的水解产物
- 高蛋白产量
- 可按需定制检测项目及CoA

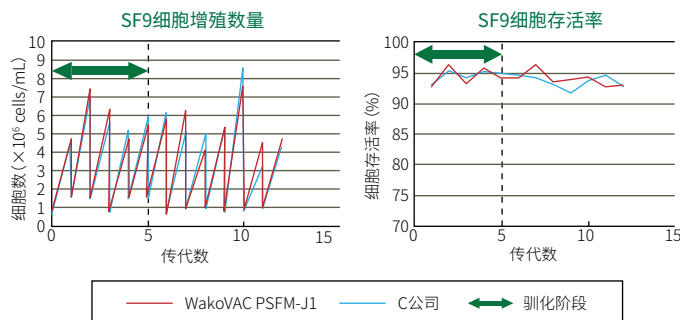


产品编号	产品名称	规格
160-25851	PSFM-J1 Medium Wako, Liquid PSFM-J1液体培养基	1 L

抗体生产用杂交瘤无血清培养基

- 无血清
- 与含血清培养基具有同等细胞增殖能力
- 与含血清培养基具有同等抗体生产能力

本产品与含有血清成分的培养基具有同等活细胞密度、生存率。

产品编号	产品名称	规格
081-10381	Hybridoma Serum-Free Medium 杂交瘤无血清培养基	1 L

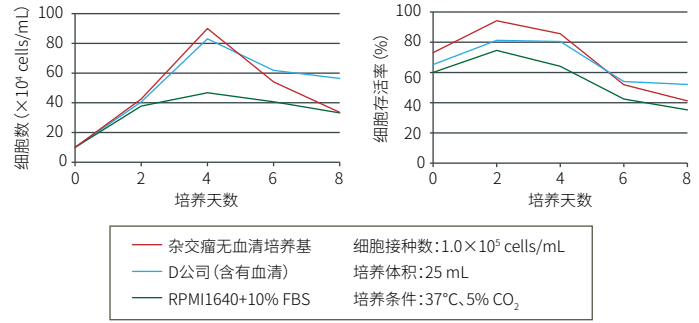


以上产品均可提供试用装



BalanCD CHO无血清培养基

无血清 化学成分限定 粉末·液体


- CHO细胞瞬转培养基及添加剂 BalanCD Transfectory CHO System
支持CHO细胞的小规模和大规模瞬时转染
- CHO细胞生长培养基 BalanCD CHO Growth A Medium - Liquid
简化实验·mg级至g级的重组蛋白产量·适应工艺放大
- 补料 Feed 4
高度浓缩新一代补料, 专为满足蛋白质量和特定的葡萄糖需求而设计

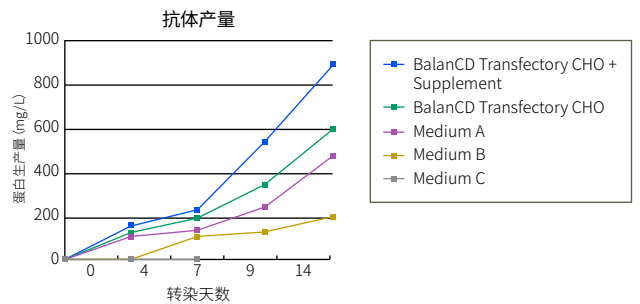

BalanCD HEK293无血清培养基

无血清 化学成分限定 粉末·液体

基因治疗病毒载体生产·蛋白瞬时表达·重组蛋白生产

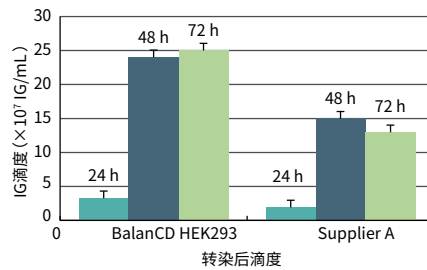

2 L生物反应器中, DNA:PEI=1:1.5 转染4个质粒, 24, 48和72 h后测定慢病毒滴度。

上述试剂仅供实验研究用, 不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako: <https://labchem-wako.fujifilm.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

